


HÜCRE REJENERASYONUNDA

**cence® PRP**

*Doğru Ürün...*

*Doğru Uygulama...*

*Mükemmel Sonuç...*

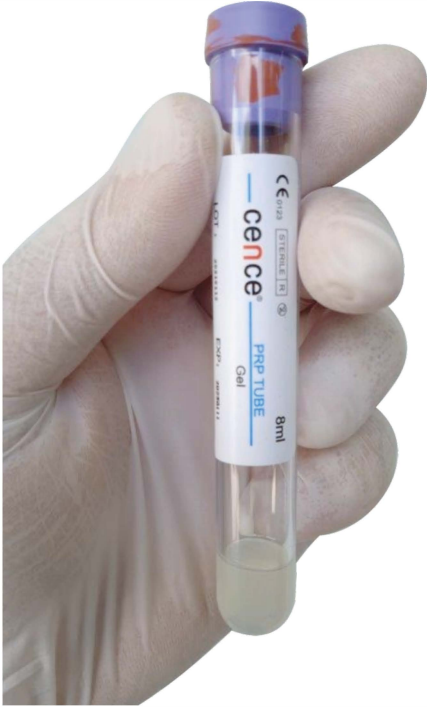


### **CENCE JELLİ PRP TÜPLERİ**

- Tüpler projensiz plastik materyalden üretilmiş non-kanserojeniktir.
- Herhangi bir antikoagulant ve aktivatör içermez,
- Havayla minimum temas, minimum kontaminasyon riski,
- %100 otolog PRP elde etme imkanı,
- Tek adımda KOLAY ve GÜVENİLİR ürün elde etme,
- %99,5 RBC, %80-85 WBC uzaklaştırma imkanı,
- Seperatör jel sayesinde kan-plazma karışma riski yok.

Class IIa sertifikalı PRP tüplerimiz ÜTS kayıtlıdır.

## PRP NEDİR?

Kendi kanınızdan elde edilen, trombosit yönünden zenginleştirilmiş plazmadır (PRP). Kişiyeye özel PRP uygulaması ile trombosit hücreleri içerisinde bulunan büyüme faktörlerinin rejeneratif (yenileyici) özellikleri sayesinde dokulardaki hasarlı bölgelerin tedavisi sağlanmaktadır.

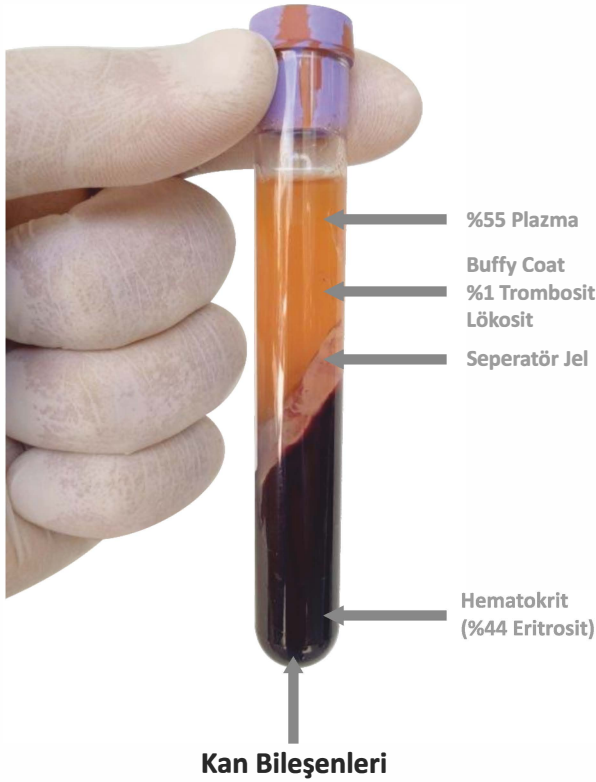


## PRP KULLANIM ALANLARI;

- Ortopedi,
- Fizik Tedavi,
- Dermatoloji / Cildiye,
- Estetik-Kozmetik,
- Saç Ekimi,
- Kadın Doğum / Jinekoloji,
- Dental uygulamalar,
- Yara kapama tedavisi,
- Tüp bebek uygulamalarında,
- Üroloji,
- Veterinerlik uygulamaları,



“Hücreyel yenilenmeye (rejenerasyonuna) ihtiyaç duyulan tüm işlemlerde”

## GROWTH FACTOR FONKSİYONLARI

### TROMBOSİT

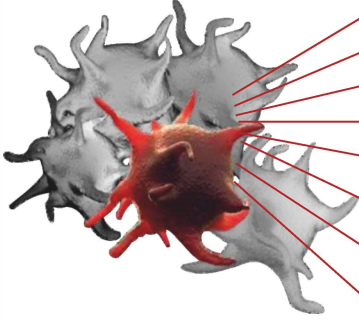

PDGF	Hücre yenilemesi ve yumuşak doku onarımı.
IGF (II)	Hücre büyümesi ve hareketliliğini uyarma.
EGF	Epidermal hücre farklılaşması.
bFGF	Anjiogenez ve hücre hareketliliğini artırma.
KGF	Epidermal büyümeyi uyararak yara iyileşmesini hızlandırma.
TGF	Hücre üremesini ve kolajen sentezini destekleme.
VEGF	Anjiogenezi uyarma.
CTGF	Hücre üremesini ve farklılaşması uyarma. Kemik büyümesini ve yenilenmesini artırma.

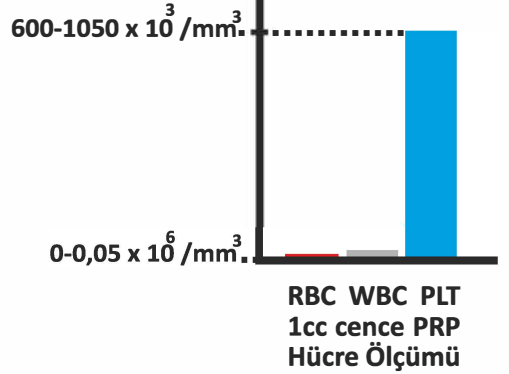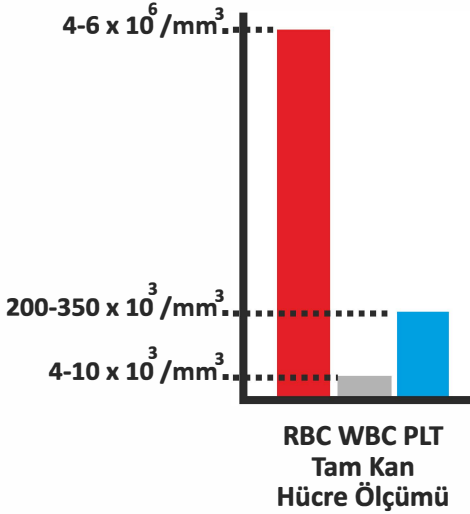

## HÜCRESEL TEDAVİDE BİR ADIM ÖNDE OLUN!


*Kapalı Sistem...*

*Güvenilir Ürün...*

*Kolay Kullanım...*

- Vakum sayesinde kolay kan alma imkanı,
- 2800 rpm'de her marka santrifüjde kullanım imkanı,
- 6 dakikada tek santrifüjleme,
- Etkin sonuç, kısa sürede güvenli ürün hazırlama olanağı,
- 10 ml tam kandan 4-5 ml PRP elde etme imkanı,
- 1cc'lik PRP sıvısında 2-5 kat trombosit yakalama imkanı,

**DİKKAT:** Alınan kan bekletilmeden 5 dk. içerisinde santrifüj edilmeli, elde edilen PRP 15 dk. içerisinde uygulanmalıdır.

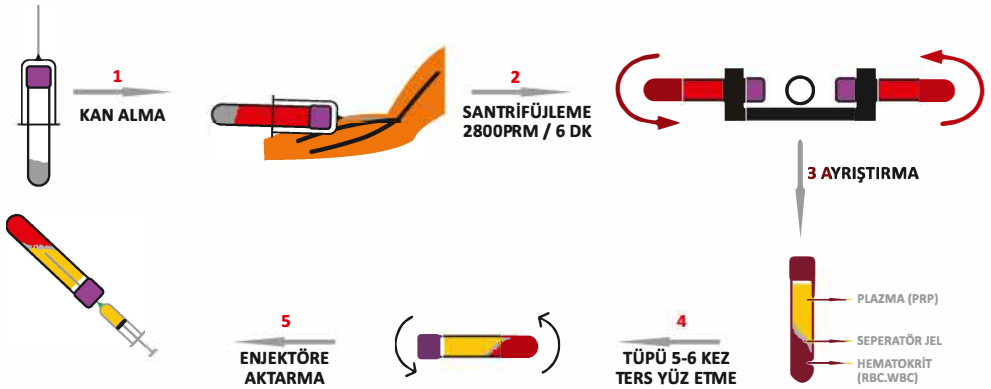

**UYARI:** Ürün kullanımı öncesinde prospektüsü okuyunuz.

**Cence Medikal ve Ticaret Limited Şirketi**

Silivrikapı Mah. Ramazan Efendi Camii Aralığı Sk. No:3/1 Kocamustafapaşa /Fatih / İstanbul  
Tel: (0212) 586 76 66 • www.cencemedikal.com.tr • info@cencemedikal.com.tr